

proxomed

Multi Hip

compass 540



Equipo

- Producto médico de clase I
- Ajuste de la posición inicial en pasos de 10
- Posicionamiento de entrenamiento en abducción/aducción y extensión/flexión de cadera en bipedestación
- Reposapiés regulable en altura para ajustar el eje de rotación
- Almohadilla de estabilización pélvica de ajuste continuo en ambos lados
- Ajuste de la longitud del brazo de palanca
- Asas para estabilizar la parte superior del cuerpo
- Escalón para facilitar el acceso al aparato
- revestimiento protector "darth frost" con superficie de almacenamiento
- Panel de formación con información inteligente sobre el funcionamiento del aparato
- Ayudas de posicionamiento reproducibles a escala

Datos técnicos

- Dimensiones (L/A/A):
144/98-204/168-195 cm
- Peso del bloque: 80 kg (8 x 10 kg)
- Peso total: hasta 271 kg
- Peso del usuario: hasta 250 kg
- Consumo de energía (con smart assist)
 - En espera: 0,0037 kWh
 - En funcionamiento: 0,018 kWh

Opcional


- [smart assist](#)
- Software [proxoforce](#)
- Ajuste fino del peso 4 x 2 kg
- Limitación del movimiento

Documentos

Manual de instrucciones
compass 540


Las instrucciones de uso para aparatos antiguos o descatalogados están disponibles gratuitamente previa solicitud a nuestro departamento de servicio técnico en service@physiomed-group.com. Indique la denominación exacta del aparato, incluido el número de serie, y su dirección. Nosotros se las enviaremos.

Imágenes de productos

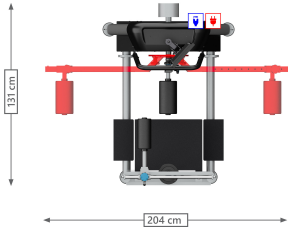


Colores de los productos

Marco

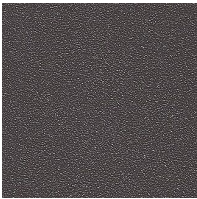

DB 703
Mineral de
hierro micáceo
antracita

Vivienda

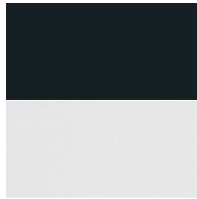

darth frost

Tapicería estándar



F6461454
Fuego

F6461197
Antracita

Equipamiento opcional CON CUBIERTA

*Los colores mostrados pueden diferir de los reales según el monitor y la resolución de la pantalla.